

Spitzbodenröhre 12 ml

Viele Laboranwendungen und präzise Analysen erfordern eine visuelle Prüfung und Volumenabschätzung der Probe. Besonders für diesen Einsatz bietet Sarstedt 12 ml-Spitzbodenröhren aus glasklarem, transparentem Polystyrol an.



Die eingespritzte Skalierung in 0,5 ml-Schritten ermöglicht eine sichere Kontrolle der Füllmenge selbst bei dunklen oder trüben Flüssigkeiten. Auch geringere Feststoffmengen mit hoher Dichte sammeln sich durch die konische Form bei der Zentrifugation zuverlässig am Röhrenboden.

Für den optimalen Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen bietet Sarstedt die 110 x 17 mm Zentrifugenröhren aus Polystyrol nun auch in der bewährten Stapelpackung und in einer sterilen Ausführung an. Alternativ kann die besonders widerstandsfähige und autoklavierbare Spitzbodenröhre aus Polypropylen für Anwendungen mit hohen thermischen, chemischen und mechanischen Belastungen eingesetzt werden.

Dieses erweiterte Produktangebot bietet eine universelle Alternative zu den Spitzbodenröhren 105 x 16,8 mm und 95 x 16,8 mm.

Produktvorteile auf einen Blick:

- Einfache Volumenkontrolle
- 40% Platzersparnis durch Stapelpackung
- Sterile Ausführung mit montiertem Stopfen

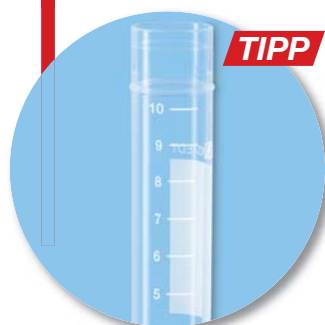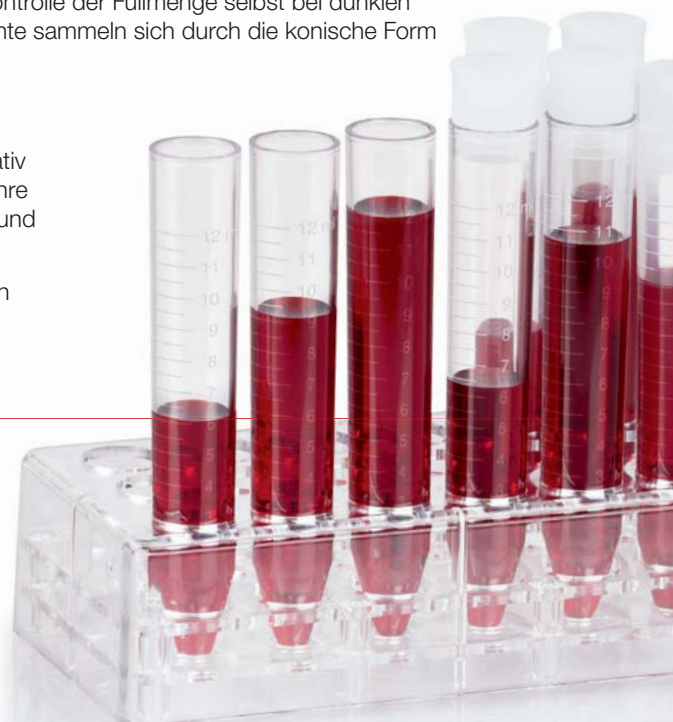

TIPP

Testen Sie auch unsere 10 ml-Spitzbodenröhre aus besonders transparentem Polypropylen. Das große Schriftfeld bietet viel Platz für die eindeutige und widerstandsfähige Beschriftung. Die aufgedruckte weiße Skalierung macht die Füllstandskontrolle noch leichter.

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Material	Ausführung	passende Stopfen	Verpackung	Alternative zu
57.462	Polystyrol	Beutel	65.793 65.816	1.000/Karton 500/Beutel	57.464.005 57.469
57.462.015	Polystyrol	Stapelpackung	65.793 65.816	1.000/Karton 250/Stapelpackung	57.464
57.462.001	Polystyrol	steril, mit montiertem Stopfen	---	500/Karton 100/Beutel	57.464.001
57.527	Polypropylen	Beutel	65.793 65.816	1.000/Karton 500/Beutel	57.513 57.519

Bestellinformation 10 ml-Spitzbodenröhre

Bestell-Nr.	Material	passende Stopfen	Verpackung
62.9924.272	Polypropylen	65.816 65.720 65.793	1.000/Karton 500/Beutel

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305-0
Telefax +49 22 93 305-3450
Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305-0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**

12 ml Tube with conical base

A lot of laboratory applications and precise analyses require a visual inspection and volume estimation of the sample. Especially for this application, Sarstedt offers 12 ml tubes with a conical base made from crystal-clear, transparent polystyrene.



The moulded graduation in 0.5 ml steps enables a safe volume control even with dark or opaque liquids. Thanks to the conical shape, even low solids volumes with a high density reliably collect at the tube base during centrifugation.

For optimal use in a range of applications, Sarstedt's 110 x 17 mm centrifuge tubes made from polystyrene are now also available in the well-established StackPack packaging, and in a sterile version. Alternatively, we recommend using the especially resistant and autoclavable conical tube made from polypropylene for applications with a high thermal, chemical and mechanical strain.

This extended product range provides a universally usable alternative to the 105 x 16.8 mm and 95 x 16.8 mm conical tubes.

Product benefits at a glance:

- Easy volume control
- 40% space saving thanks to StackPack
- Sterile version with assembled push cap

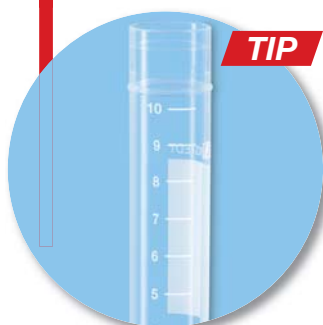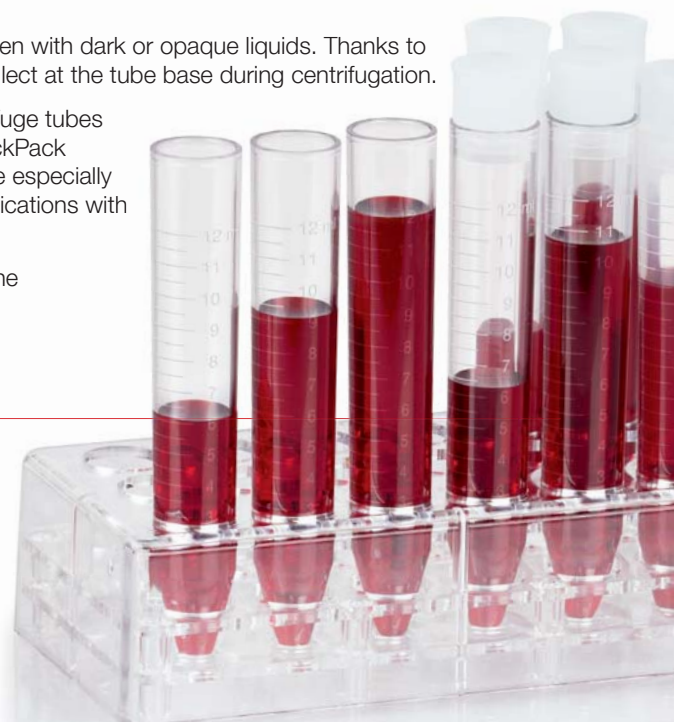

TIP

Please also test our 10 ml conical tubes made from particularly transparent polypropylene. A generously dimensioned writing space enables clear and durable marking. The printed white graduation is an added benefit to facilitate fill level control.

Ordering information

Art. No.	Material	Version	Compatible Caps	Packaging (qty.)	Alternative to
57.462	Polystyrene	Bag	65.793 65.816	1.000/box 500/bag	57.464.005 57.469
57.462.015	Polystyrene	StackPack	65.793 65.816	1.000/box 250/StackPack	57.464
57.462.001	Polystyrene	sterile, with assembled push cap	---	500/box 100/bag	57.464.001
57.527	Polypropylene	Bag	65.793 65.816	1.000/box 500/bag	57.513 57.519

Ordering information 10 ml conical tube

Art. No.	Material	Compatible Caps	Packaging (qty.)
62.9924.272	Polypropylene	65.816 65.720 65.793	1.000/box 500/bag

SARSTEDT AG & Co.
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 305-0
Fax +49 2293 305-3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com